

Руководство пользователя

Model U



Важно. Ознакомьтесь с полным перечнем противопоказаний, описанных в данном руководстве

Объединяет 6 клинически обоснованных методик, рекомендованных косметологами для проведения домашних протоколов:

Выберите подходящий протокол, сформулированный косметологами

стр

Физиологические микротоки: 1 2 /Запускают лимфодренаж, устраняют отеки, препятствуют развитию птоза. /Активируют выработку собственного коллагена и эластина. /Улучшают микроциркуляцию и цвет лица, выравнивают рельеф кожи.	EMS* 3 4 5 режимы /Укрепляет мышечный каркас и корректирует овал лица. /Улучшает текстуру и рельеф кожи. /Расслабляет гипертонус мышц, восстанавливает симметрию лица. /Подходит для обработки зон тела	LED-Laser терапия Иконка волны + удержание 5 секунд /Восстанавливает гидролипидный баланс, эластичность кожи. /Обладает противовоспалительным и восстанавливающим действием. /Корректирует пигментацию, застойные процессы, постакне. /Разглаживает морщины, препятствует фотостарению кожи. /Запускает клеточную энергию АТФ.
Охлаждение 14-16 C Иконка холод /Освежает и тонизирует кожу. /Сужает поры, подготавливает к макияжу /В режиме холодного компресса. (! микротоки и EMS отключены) уменьшает синеву сосудов и отечность под глазами.	Термотерапия. Прогрев Температура 42-45°C. Иконка нагрев /Стимулирует неоколлагенез и синтез эластина, уплотняет и подтягивает кожу. /Усиливает проникновение активных компонентов уходовых средств. /Разглаживает мелкие морщины, нормализует выработку себума.	Вибрационный массаж Иконка волны /Усиливает действие других методик. /Активирует лимфодренаж, снимает отечность. /Расслабляет мышцы и снимает гипертонус. В режиме EMS работает с мышцами шеи и подбородком. /Обладает антистрессовым и релаксационным действием.

Синергия данных методов создает оптимальные условия для превентивного антивозрастного воздействия и эффективной терапии против возрастных изменений кожи.

Узнайте больше о принципах действия приведенных методик

Для достижения максимального результата используйте Model U регулярно, следуя протоколам применения, разработанным специалистами. Используйте протоколы, приведенные в данном руководстве, разработанным косметологами. Или пройдите персональную консультацию для разработки протокола, подходящего вашей коже.

*Electrical Muscle Stimulation (Электростимуляция)

Общие правила

/Проводите протоколы только на очищенной коже.

/Всегда наносите токопроводящий гель при использовании режимов Физиологические микротоки или EMS.

/В режимах Микротоки и EMS при первом использовании проведите тест в области запястья. Начните с первого режима, постепенно увеличивайте режим.

/При вечерней процедуре Термотерапии нанесите собственную уходовую сыворотку, затем нанесите гель.

/После процедуры удалите остатки геля, нанесите увлажняющий ночной крем, сыворотку или маску.

В режиме микротоков (иконка шкала) не используйте без токопроводящего геля. Обновляйте слой по мере высыхания.



ЭКСПРЕСС АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

к использованию режимов Микротоки и EMS, а также проведению протоколов, содержащих режимы микротоки и EMS

/Вы беременны или кормите? - НЕЛЬЗЯ.

/У вас есть кардиостимулятор, аритмия, эпилепсия? - НЕЛЬЗЯ.

/У вас онкология (в т.ч. в прошлом, менее 5 лет ремиссии)? - НЕЛЬЗЯ.

/Во рту или на лице есть металлические элементы (штифты, коронки, нити, пирсинг)? - НЕЛЬЗЯ.

/На лице есть гнойнички, ранки, повреждения, сильное покраснение (розацеа), герпес? - ОТЛОЖИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ.

/Вы делали ботокс/филлеры? - ПРИСТУПАЙТЕ СПУСТЯ 2 НЕДЕЛИ.

/У вас сахарный диабет или болезни крови? - ПРОЙДИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СВОЕГО ВРАЧА.

Все ответы «НЕТ»? - МОЖНО, соблюдая инструкцию.

*При использовании технологии EMS (3-5 режимы) ознакомьтесь с полным списком абсолютных и относительных противопоказаний, приведенных на странице

Model U

Общие правила использования устройства.

Важно. Ознакомьтесь с полным перечнем противопоказаний, описанных в данном руководстве

Проводите на очищенной коже лица.



Нанесите токопроводящий гель



Кожа не должна быть сухой. Регулярно обновляйте слой геля по мере необходимости.

Правила выбора средств:

Всегда:
токопроводящий гель. Необходим для проведения импульсов микротоков и гладкое скольжение по поверхности кожи.

Опционально:
сыворотки, содержащие коллаген, пептиды, на основе гиалуроновой кислоты.

Нельзя:
средства на водной основе, содержащие масла, силиконы, жирные составы: крема, агрессивные кислоты, пилинги.



Рекомендации косметологов:


используйте комбинированный подход, сначала наносите на кожу сыворотку с гиалуроновой кислотой, поверх нее тонкий слой токопроводящего геля. Это обеспечивает эффективное аппаратное воздействие и интенсивный уход.

Model U


Общие правила использования устройства.

Важно. Ознакомьтесь с полным перечнем противопоказаний, описанных в данном руководстве

Карта областей проведения процедур, применяется симметрично

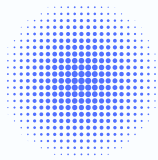


разрешенные
для воздействия

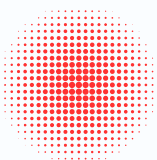

запрещенные
для воздействия




направление линий
воздействия

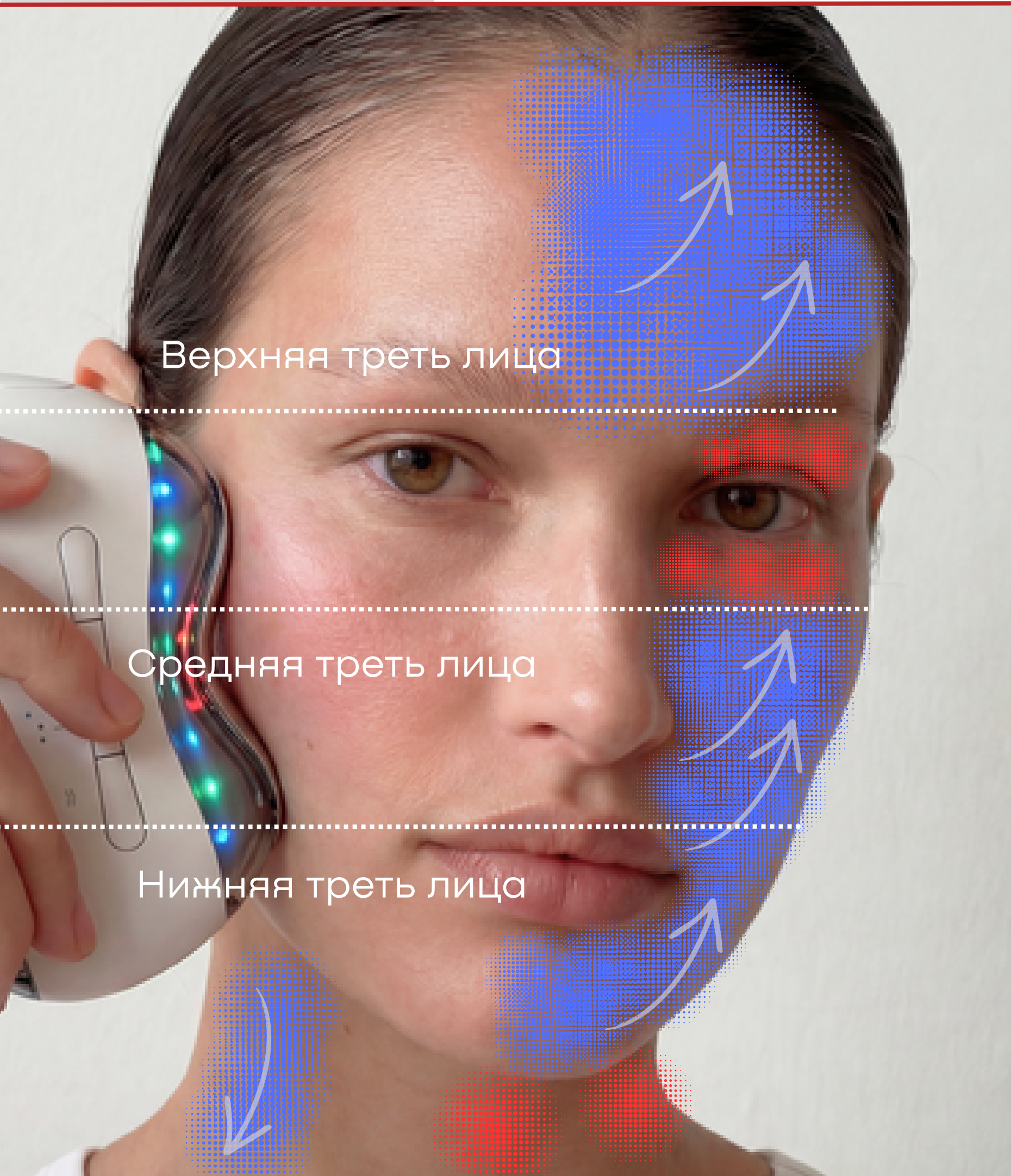

Model U

В случае возникновения дискомфорта любого характера, немедленно прекратите использование устройства.

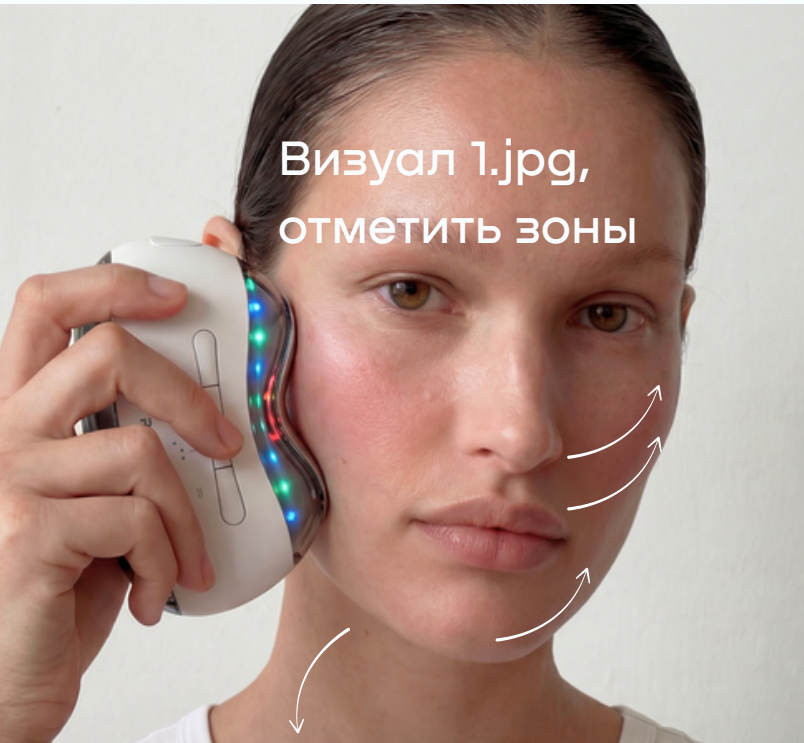

Визуал в работе

Приложите холодные электроды к периорбитальной области. Удерживайте 10-15 секунд. Далее проведите один протокол Начало дня.

Визуал 5 или 6.jpg, отметить зоны

Физиологические протоколы

Рекомендуемый возраст: 19-55 лет

Протокол Начало дня.

Снятие отеков, моментальный тонус и свежесть кожи, выравнивание рельефа, подготовка к нанесению макияжа.

Время проведения: 5 минут.
При необходимости повторите.

Регулярность: 3-4 раза в неделю в течение 3-х недель. Сделайте перерыв на одну неделю.

Включите режимы



^{**} Микротоки 1 или 2 режим (1 или 2 индикатора горят)



Зоны: средняя и нижняя треть лица, шея по массажным линиям^{**}

^{**}согласно правилам исключения запрещенных зон, описанных на предыдущей странице

Протокол Холодный компресс.

Уменьшение темных кругов и отечности под глазами, уменьшение локальных отеков.

Время проведения по 10-15 секунд в каждой области

Включите режимы



^{**}

^{**}Важно! Отключите режимы Микротоков и EMS.

Для этого:

Активируйте режим охлаждения (иконка холод)

Нажимайте на (иконка шкала делений), пока индикация режимов не погаснет. ● ● ● ● ● ни один из индикаторов не светится

Протокол Универсальный

Повышение упругости и работа с рельефом кожи, улучшение цвета лица, уменьшение пигментации, постакне.

Время проведения: 5 минут.

Регулярность: 2 раза в неделю в течение 2-х недель. Сделайте перерыв на одну неделю.

Включите режимы

Микротоки 2 режим


Иконка Прогрев

Иконка LED-Laser (удерживайте в течение 5 секунд)

Зоны: все лицо по массажным линиям, кроме запрещенных областей^{**}

Model U

В случае возникновения дискомфорта любого характера, немедленно прекратите использование устройства.

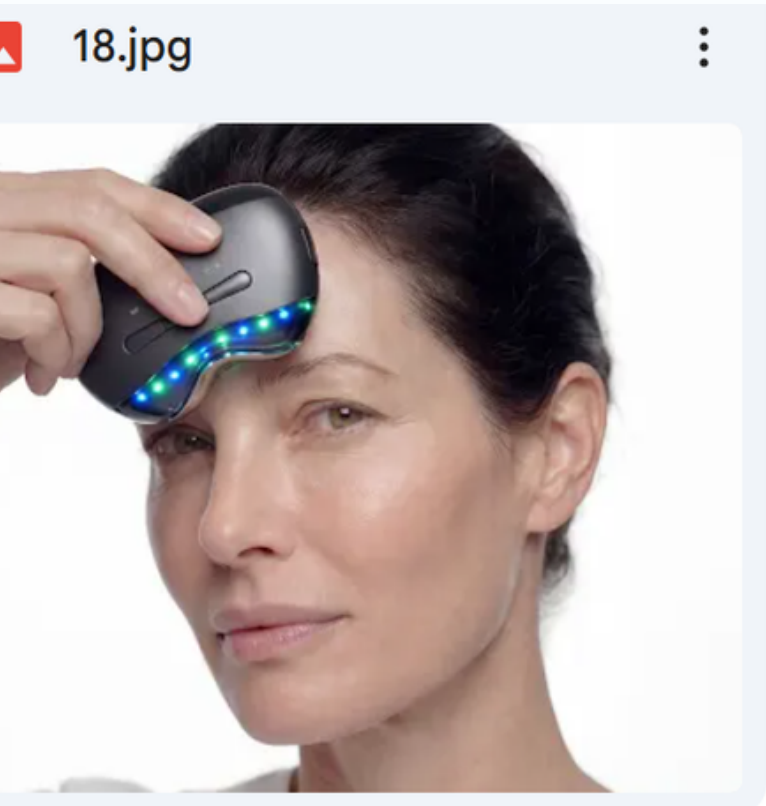

EMS протоколы

Рекомендуемый возраст:
30-65 лет

Протокол Верхняя треть лица.

Разглаживание морщин, подтяжка кожи лба


Время проведения: 5 минут.
Максимально допустимое время воздействия 10 минут.

Включите режимы

EMS 3-4 режим (в скобках иконка шкала, 3-4 индикатора горят) LED-Laser (иконка волна) Иконка Прогрев
удерживайте в течение 5 секунд

Следуйте массажным линиям. Важно! Не допускайте контакта электродов с кожей век.

Регулярность: 2-3 раза в неделю. Курс 4 недели.
2 недели перерыв. Курс 4 недели. 4 недели перерыв.

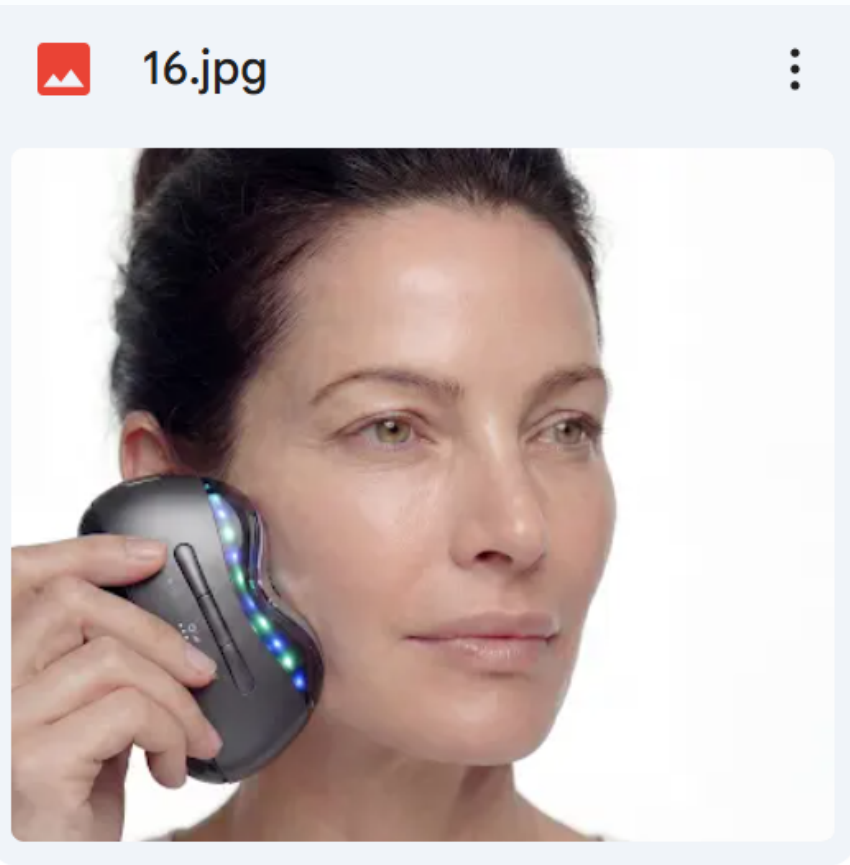

Протокол Активный лифтинг-эффект.

Укрепление контура, подтяжка средней и нижней трети лица.

Время проведения: 5 минут.
Максимально допустимое время воздействия 10 минут.


Определите свой тип старения. Выбирая интенсивность режима ориентируйтесь на чувствительность и состояние кожи

Деформационный тип
Рекомендуемые режимы:
EMS 3-4 режим + иконка LED Laser (удерживать вибромассаж 5 секунд) + иконка Нагрев + иконка Вибромассаж

Мелкоморщинистый тип
Рекомендуемые режим
EMS 3 режим (3 иконки горят) + LED Laser

Зоны: средняя и нижняя треть лица, шея*
*согласно правилам исключения запрещенных зон, описанных на предыдущей странице

Регулярность: 2-3 раза в неделю. Курс 4 недели.
2 недели перерыв. Курс 4 недели. 4 недели перерыв.

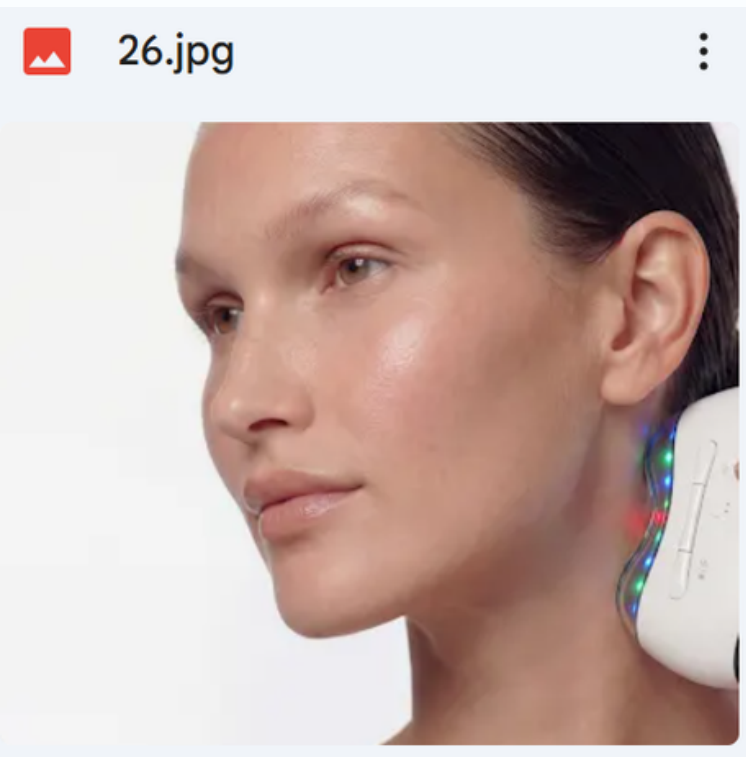

Протокол Вечерний.Расслабление

Рекомендуемый возраст: 30-65 лет

Область: лицо- все разрешенные к воздействию области

Время проведения: 5 минут

Включите режимы:

Физиологические микротони 1 режим (горит 1 индикатор)	LED-Laser удерживайте (иконка волна) 5 секунд.	Прогрев (иконка)
---	--	------------------

Область: шея- массажные линии, не затрагивающие щитовидную железу, лимфоузлы

Время проведения: 5 минут

Включите режимы:

Иконка волна	LED-Laser удерживайте (иконка волна) 5 секунд.
--------------	--

Регулярность: 2-3 раза в неделю. Неделю перерыв.



Протокол Красивые плечи

Обвисание кожи внутренней части плеч

Рекомендуемый возраст: 30-65 лет

Область: внутренняя сторона плеч

Время проведения: 10 минут

Включите режимы:

EMS 5 режим (горит 1 индикатор)	Вибромассаж (иконка)	Прогрев (иконка)
---------------------------------	----------------------	------------------

Область: внутренняя и внешняя линия плеч

Регулярность: 4-5 раз в неделю. Длительность 4 недели. Неделя перерыв.

Уход за устройством

- После каждого использования протирайте электроды сухой салфеткой или влажной салфеткой с нейтральным PH, допустимо содержание спирта для антисептической обработки электродов. Для полировки электродов используйте салфетку, которая поставляется в комплекте.
- Запрещено мыть устройство, корпус не имеет защиты от попадания влаги.

Важно

Противопоказания к использованию

Ниже представлен клинически обоснованный список противопоказаний, приведенный на основе общих данных терапевтов

Абсолютные противопоказания (использование устройства в режимах физиологические микротоки и EMS запрещено).

Если у вас есть хотя бы один пункт из этого списка, использование микротоков дома запрещено.

1. Сердечно-сосудистая система и импланты

- Наличие кардиостимулятора или дефибриллятора — строжайшее табу. Импульсы нарушают работу прибора .
- Нарушения сердечного ритма (аритмия), кардиопатия .
- Инфаркт или инсульт в анамнезе .
- Склонность к тромбозам, тромбофлебит, эмболии .

2. Беременность и лактация

- Беременность (на любом сроке) — абсолютное противопоказание, единое для всех источников .
- Период грудного вскармливания .

3. Онкология и новообразования

- Любые злокачественные опухоли (независимо от локализации и срока давности). Некоторые источники уточняют: ремиссия менее 5 лет также под запретом .
- Доброкачественные опухоли в зоне воздействия (кисты, миомы и др.) .

4. Нервная система и психические расстройства

- Эпилепсия и любые судорожные состояния .
- Психические заболевания в активной стадии .
- Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона .

5. Металл и инородные тела в зоне воздействия

- Золотые/платиновые нити (армирование лица)
- Металлические импланты, штифты, зубные коронки (особенно передние, через которые может пройти ток). Некоторые источники допускают изоляцию коронок ватными валиками, но безопаснее полностью исключить зону челюсти.
- Пирсинг в зоне обработки — обязательно снимать

Важно

Противопоказания к использованию

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ (Требуют консультации врача или временного отказа)

1. Кожные заболевания и повреждения

- Острые воспалительные процессы: гнойничковое акне, герпес в активной фазе, фурункулы
- Нарушения целостности кожи: раны, порезы, ссадины, ожоги, свежие рубцы (менее 6-12 месяцев) .
- Купероз и розацеа — мнения расходятся. Одни источники называют микротоки лечением купероза . Другие — строго запрещают при розацеа и выраженной сосудистой сетке . Вывод: при ярко выраженных звездочках — только по назначению врача, самостоятельно — риск усилить сосудистый рисунок.
- Дерматиты, экземы, келоидные рубцы.

2. Инфекции и общее состояние организма

- ОРВИ, грипп, любое заболевание с температурой .
- Обострение хронических заболеваний .

3. Совместимость с другими косметологическими процедурами

- Инъекции ботулотоксина — микротоки ускоряют выведение препарата. Эффект от уколов сохраняется меньше времени. Рекомендуется пауза 2-4 недели после инъекций .
- Филлеры — микротоки усиливают кровоток
- и выработку фермента гиалуронидазы, что сокращает срок жизни наполнителя. Рекомендуется пауза минимум 1 месяц .
- Подтяжка лица нитями — строгий запрет, если нити металлические; ограничения при других типах нитей (пауза не менее года)

4. Системные заболевания

- Сахарный диабет (особенно 1 типа и некомпенсированный 2 типа) — риск нарушения микроциркуляции и заживления .
- Заболевания крови, нарушения свертываемости (гемофилия) .
- Коллагенозы (системная красная волчанка, склеродермия) .
- Тяжелые заболевания внутренних органов (печени, почек) в стадии декомпенсации.

5. Индивидуальная непереносимость

- Непереносимость электрического тока (резкое жжение, боль, сильное покраснение даже на минимальных настройках).
- Металлический привкус во рту во время процедуры — повод прекратить сеанс.

6. Возраст

- Детский возраст до 18 лет — использование не рекомендуется, требуется медицинское обоснование

Меры безопасности предосторожности

Важно! Ваша безопасность - самое главное. Соблюдайте все меры безопасности и предосторожности при взаимодействии с устройством.

Устройство должно храниться в месте, недоступном для детей, младше 14 лет, а также людей, не отвечающих и не несущих ответственность за свои действия. Перед первым использованием проведите тест на реакцию на небольшом участке кожи руки.

Всегда наносите специальный гель для микротоков и обновляйте слой геля в процессе процедуры по мере высыхания.

Слой должен быть достаточным для мягкого скольжения, но не избыточным.

Не используйте устройство на сухой коже.

Не используйте устройство на ранах, воспаленных участках или чувствительной коже.

Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.

Никогда не заряжайте устройство вблизи любых источников воды.

Подключайте в электросеть и отключайте из электросети только сухими руками.

Не погружайте продукт в воду и не мойте его непосредственно под струей воды.

Для очистки устройства используйте салфетки с нейтральным PH или салфетки для обработки с дезинфицирующими свойствами.

Не храните и не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами и/или вблизи нагревательных приборов и источников тепла, в условиях высокой температуры, влажности.

Не вскрывайте корпус устройства и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите устройство от ударов и падений - это может привести к физическим дефектам, поломке устройства и утрате гарантии на устройство.

Не замораживайте устройство.

Температурные режимы хранения от +3С до +38С при относительной влажности менее 80%.

При использовании устройства строго следуйте всем рекомендациям, описанным в данном руководстве пользователя. Неправильное использование устройства может привести к непредсказуемым последствиям, за которые Изготовитель и Производитель устройства не несут ответственности.

Если у вас появились вопросы относительно корректной эксплуатации устройства, а также любые вопросы, касающиеся устройства, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

88003330569

remez.com.ru

QR

Model U

REMEZ

Период действия гарантии

Гарантия на устройство REMEZ Model U составляет 2 года с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания, описанных в руководстве по эксплуатации и мерах предосторожности.

Срок службы устройства устанавливается в соответствии с требованием «Закона о защите прав потребителей» и составляет 5 лет с даты продажи.

Если устройство находится на гарантии и неисправность входит в перечень пунктов, покрываемых гарантией, оно будет отремонтировано бесплатно.

В других случаях сервисные инженеры предложат возможные варианты решения проблемы.

По вопросам содержания гарантии обращайтесь в Службу заботы о клиентах REMEZ.

**Служба заботы
о клиентах**

8 (800) 333 05 69

service@romatigroup.com

* Список
авторизованных
сервисных центров.



Обслуживание по гарантии включает

- Ремонт или замену устройства при наличии заводского брака;
- Ремонт или замену устройства в случае поломки устройства в течение всего гарантийного срока.

Правила предоставления гарантии

- Для получения обслуживания по гарантии факт покупки устройства должен быть подтвержден любым удобным способом и содержать информацию о дате совершения покупки. При обращении в сервисный центр необходимо предоставить эти данные в цифровом (скан, скриншот) или печатном формате.
- Решение о ремонтопригодности и (или) замене устройства будут приняты официальным сервисным центром REMEZ центром или авторизованным сервисным центром* на основании официального заключения о состоянии устройства и в соответствии с правилами предоставления гарантии.
- Срок проведения ремонтных работ установлен «Законом о защите прав потребителей» и должен быть осуществлен в течение 45 дней с момента принятия сервисным центром устройства на ремонт.
- Срок гарантийного ремонта не включает сроки проведения экспертизы, если такая проводится по инициации одной из сторон.
- Все неисправные или замененные в ходе ремонта или сервисного обслуживания элементы устройства переходят в собственность REMEZ.

Устройства могут быть приняты в ремонт по гарантии только в чистом сухом виде, очищенные согласно правилам эксплуатации и обслуживания, описанных в руководстве пользователя, правилах и мерах безопасной эксплуатации.

Обслуживание по гарантии не включает

- Устранение неисправностей, которые возникли в результате повреждений, вызванных несоблюдением всех пунктов правил по эксплуатации и обслуживанию устройства, описанных в руководстве пользователя и мерах предосторожности;
- Устранение механических повреждений, возникших в процессе неосторожной эксплуатации: сколы, царапины, трещины, механическую деформацию, следы химического, термического и физического воздействия;
- Устранение неисправностей, вызванных использованием устройства в каких-либо целях, не имеющих прямого отношения к предназначению устройства;
- Устранение дополнительных неисправностей, вызванных повреждениями во время транспортировки покупателем устройства в сервисный центр;
- Устранение неисправностей, вызванных использованием устройства в профессиональных или коммерческих целях, если такое специально не обозначено в назначении устройства;
- Устранение поломок, возникших в ходе использования не оригинальных аксессуаров, запчастей и (или) расходных компонентов устройства;
- Ремонт устройств со следами вскрытия;
- Ремонт устройств, которые были на сервисном обслуживании в сервисных центрах, не являющихся официально авторизованными брендом REMEZ;
- Замену расходных материалов, вышедших из работы вследствие естественного износа.

При обращении

Направьте скрин или фото чека/онлайн

чека или подтвердите факт покупки

возможным способом.

Гарантия

Model U

REMEZ

Устройство для ухода за кожей, RMF-800/RMF-800W

Технические характеристики

Параметры устройства:

- NFC метка для регистрации устройства с переходом на официальный сайт remez.com.ru
- Физиологические микротоки, токи до 300 мкА, частота 12 Гц - 34 Гц
- EMS (Электростимуляция) 8-20 мА
- Led Laser длина волны: 660нм (±10нм)
- Вибромассаж 80-120 вибраций в секунду
- Автоотключение устройства через 5 минут (1 протокол)
- RGB подсветка отключаемая
- Степень водозащиты: IPX0 (нет защиты)
- Рабочее напряжение: 3,7В
- Емкость аккумулятора 2200 мАч
- Время зарядки: 3-4 часа
- Время работы от аккумулятора: 1,5-2 часа
- Время работы от аккумулятора до 7 дней*
- Номинальная мощность: 8 Вт - 12 Вт MAX
- Зарядка: Type-C
- Размеры изделия: 10,5 * 8 * 4 см
- Вес нетто: 292 г
- Гарантия 2 года*

Комплектация:

Устройство для ухода за кожей

USB кабель: Напряжение 5В, сила тока 1А, длина 50 см

Сетевой адаптер: Входные параметры: 100-240В~50/60Гц 0.15А,

Выходные параметры: 5В-1А, 5 Вт

Руководство пользователя

*при соблюдении Правил гарантии



25-35 лет –
Время преумножить
красоту и потенциал
кожи

визуал на заднюю обложку
Morning 10 jpg

Model U

Новый превентивный подход.

Создает красивый рельеф,
устраняет видимые
несовершенства кожи

Включает методы с лечебным воздействием, поддерживает здоровье клеток и активирует выработку коллагена. Имеет терапевтическое воздействие предупреждая раннее старение, вызванное факторами фотостарения, стресса, плохой работой лимфатической системы.

Создает красивый рельеф, очерченные скулы за счет анатомического дизайна электродов. Уменьшает отеки, снижая риски раннего птоза.

визуал на заднюю обложку
Anti-Age 24.jpg

Встретим свои 50
с качеством кожи,
как в 35

Model U

Новый превентивный подход.
Методы замедляющие естественные
процессы старения кожи

Model U работает комплексно, технологии основаны на подходе клинических рекомендаций «prejuvenation» (предотвращение старения до появления признаков), оформившиеся в новый стандарт в 2010 году на симпозиумах ASDS (Американское общество дерматологической хирургии) и IMCAS (Всемирный конгресс по эстетической медицине). Model U, улучшая кровообращение, запускает лимфодренажные процессы, постепенно подтягивая и уплотняя кожу, снимает зажимы мышц и придает коже здоровое сияние.